



Connect Braille

Ergonomische & kompakte Braillezeile -
die ideale Grundausstattung

Helfen heißt verstehen

Connect Braille

Die 40-stellige Braillezeile Connect Braille ist ideal für alle, die eine klare, funktionale Lösung suchen. Sie bietet genau das, was im Alltag zählt: eine Brailleausgabe mit 40 konkaven Modulen sowie eine integrierte und ergonomische 8-Punkt-Tastatur für schnelles und komfortables Arbeiten.

Ihr durchdachtes, ergonomisches Design sorgt für hohe Benutzerfreundlichkeit - ob am heimischen Arbeitsplatz oder unterwegs mit dem Laptop.

Mit einem Gewicht von nur 820 g und einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden ist die Connect Braille der perfekte Begleiter im täglichen Einsatz. Die zentrale Steuertaste, ein intuitiver Joystick und diskrete Vibrationssignale sorgen für einen leisen, angenehmen und effizienten Bedienkomfort.



Mehr zum Produkt:

helptech.de/braillezeilen/connect-braille



Universelle Kompatibilität

Per USB an den PC angeschlossen, ist die Connect Braille durch die HID-Technologie sofort für Sie einsatzbereit.

Mit der ergonomisch gestalteten Brailletastatur können Sie direkt auf der Connect Braille Texte eingeben. Zusätzlich können Sie eine Standardtastatur per USB anschließen.

Die Connect Braille ist mit allen gängigen Screenreadern kompatibel, darunter JAWS, NVDA, SuperNova, VoiceOver und TalkBack.

Smarter Zugang

Die Connect Braille können Sie neben USB-C auch drahtlos per Bluetooth mit bis zu 4 Geräten gleichzeitig verbinden. So können Sie die Connect Braille auch mit iOS- und Android-Geräten wie Smartphones und Tablets nutzen. Per Kurztaste wechseln Sie bequem zwischen den verbundenen Geräten und der USB-Schnittstelle um.

Die perfekte Ergonomie

Die Brailleelemente der Help Tech Braillezeilen sind konkav geformt und nach hinten geneigt. So ist die Tastfläche ideal an die abtastenden Finger angepasst und ermöglicht ein besonders angenehmes Lesen. Ihre Handgelenke werden spürbar entlastet.

Praktische Bedienelemente

Die zusätzliche Leertaste, zentral zwischen den Brailletasten platziert, ermöglicht eine schnelle Eingabe von Steuerkommandos. So kann beispielsweise mit der Strg-Taste die Sprachausgabe sofort gestoppt werden. Zudem bietet die Connect Braille diskrete Rückmeldungen: Zwei Vibrationsgeber senden spürbare Signale nach links oder rechts und unterstützen Sie taktil bei der Navigation.

Ihr Weg zum Hilfsmittel

1. Beratung

Kostenlose und unverbindliche Beratung bei Ihnen oder an einem unserer Standorte.

2. Verordnung

Damit wir das Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragen können, benötigen wir die Verordnung 8a vom Augenarzt.

3. Beantragung

Sie senden uns die Verordnung - wir kümmern uns um die gesamte Beantragung und Abwicklung.

4. Lieferung & Einweisung

Nach Erhalt der Bewilligung vereinbaren wir einen Liefertermin, installieren das Gerät und weisen Sie in die Nutzung ein.



Technische Daten



Eingabe/Ausgabe

- 40 konkave piezokeramische Brailleelemente mit Cursorrouting und einstellbarer Stiftstärke
- 8 Funktionstasten/Brailleingabetasten
- 3 Leertasten
- Vibrationsignale



Navigation/Steuerung

- 2 Triple Action-Tasten
- 5-Wege Joystick
- Steuerungstaste (Strg-Taste)



Anschlüsse/Schnittstellen

- 1 USB Typ C (für PC oder Ladekabel)
- 2 USB Typ A (Tastaturanschluss)
- Bluetooth




Akku

- Lithium-Ionen-Akku 5000 mAh
- Akkulaufzeit: bis zu 40 Std.
- Schnellladezeit: 3 Std.



Maße (B x T x H) & Gewicht

- 31,9 x 10,4 x 2,2 cm
- 820 g

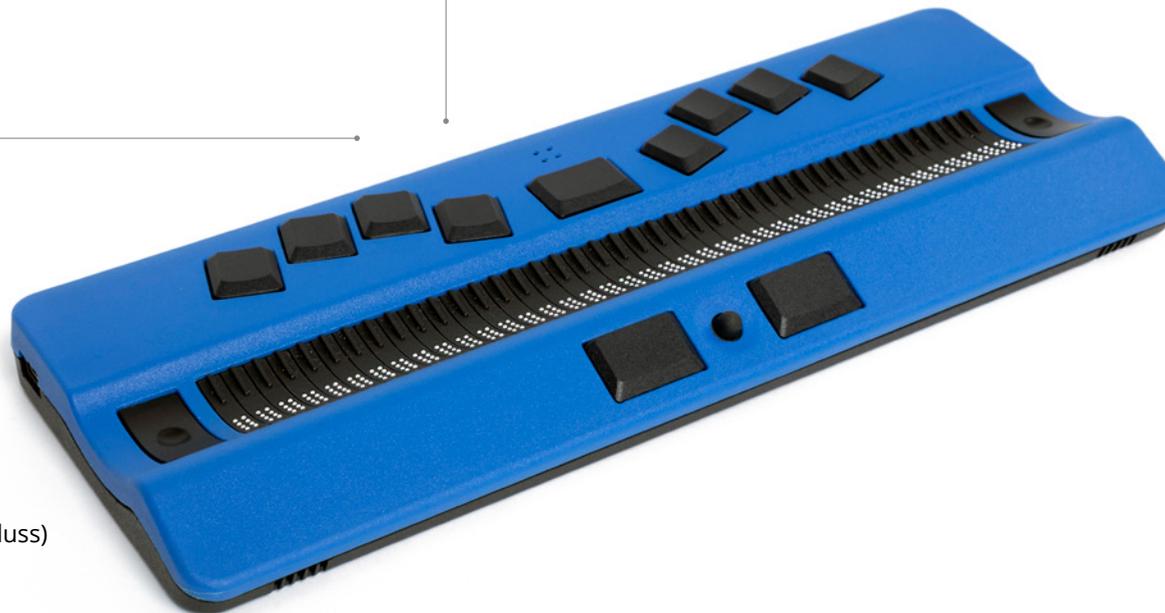

Wir beraten Sie gerne

Bundesweit und in unseren
Beratungszentren in Berlin,
Hamburg, Köln, Marburg und Stuttgart.



Help Tech GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 10, 72160 Horb



07451 5546-0



info@helptech.de
www.helptech.de



**Weitere
Kontaktdaten:**
www.helptech.de

Help Tech. Helfen heißt verstehen.

Folgen Sie uns:   

Connect Braille ist ein Produkt der Firma Help Tech.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten © Help Tech 05/2025.